




Velocidad	100 ~ 1500 rpm
Torque	0.4 ~ 4.2 N.cm
Peso Pieza de Mano	106.8 gr. (Incluye contraángulo)
Modos de trabajo	FWD, REV REC(SGP), ATR
Ángulo Reciprocante	20° ~ 340°

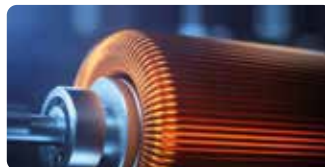

MOTOR BRUSHLESS de alta performance para un bajo desgaste, que genera bajo calentamiento, que brinda un tiempo de vida del Endomotor mas útil y larga.



Modo de ATR

Tiene un movimiento reciprocante a un ángulo programado después de alcanzar el torque establecido.

El ángulo de rotación es preciso por eso reduce el riesgo de rotura y permite un tratamiento endodóntico más eficiente.

Ángulo reciprocante

El ángulo reciprocante ajustable es entre 20° y 340°, con intervalos de 10°, esto reduce el riesgo de rotura de los instrumentos y permite una preparación más eficiente y segura.

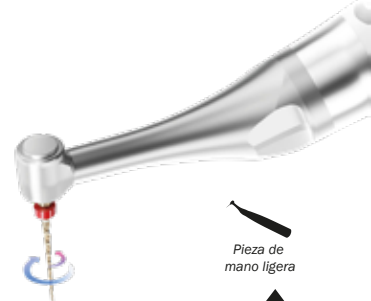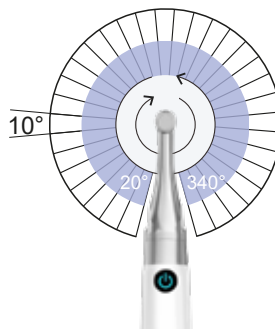

Pieza de mano ligera

Motor Brushless de larga vida útil

Motor Brushless de alto rendimiento

6:1
6:1 Contra - ángulo

360°
Contra - ángulo giratorio

Programa cualquier sistema de limas del mercado



Puede conectarse a un Localizador de Ápice